




TriGO<sup>o</sup>



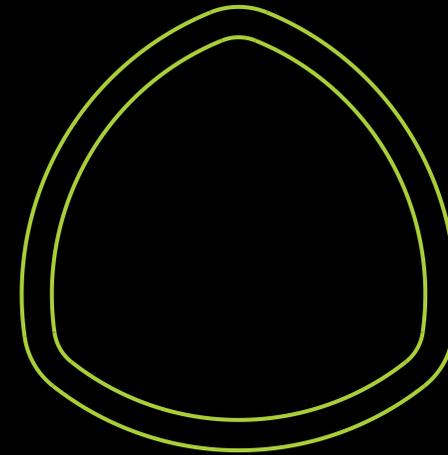

## Warum dreieckige Rohre?

Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams haben die dreieckigen Rohre, die die Grundlage Ihres **Trigo** bilden, perfektioniert. Sie verleihen Ihrem Rollstuhl nicht nur ein modernes und einzigartiges Aussehen, sondern haben auch den Vorteil, dass sie Ihren Trigo leichter machen und gleichzeitig die optimale Festigkeit beibehalten.

# TRIGO S



Unser Rollstuhl ist in zwei Versionen erhältlich. Zum einen gibt es den **Trigo S**, einen aktiven und faltbaren Stuhl mit in den Rahmen integrierten Fusstützen. Das Design des Trigo S ist aktiv und sportlich. Diese Konfiguration macht den Rollstuhl noch leichter, wobei die maximale Festigkeit erhalten bleibt.





# TRIGO T



Es gibt auch ein zweites Modell, den **Trigo T**. Dieser Rollstuhl wurde mit dem gleichen modernen Aussehen entworfen. Der faltbare Rahmen hat wegschwenkbare und abnehmbare Fußstützen. Durch sein Design ist dieses Modell ideal für den einfachen Transport.

## DESIGN

**VERMEIREN** hat den **Trigo** als einen ultramodernen Rollstuhl entworfen, der für jeden Geschmack etwas bietet. Daher kann Ihr Trigo bei der Bestellung vollständig personalisiert werden; vom Rahmen bis zu den Rädern, einschließlich der Armlehnen und einer Palette von mehr als 30 möglichen Farben. Kurz gesagt, es gibt fast so viele verschiedene Trigo-Rollstühle wie Benutzer!





## STUFENLOS EINSTELLBAR

Abgesehen von den bei der Bestellung zu wählenden Konfigurationen (Größe, Art der Rückenlehne, Armlehnen, Rahmen, Optionen,...) bleibt Ihr **Trigo** ein dynamischer Stuhl. An jedem Stuhl kann eine große Anzahl von Einstellungen vorgenommen werden, wie z.B. Radsturz, Sitzhöhe,...




## EINSTELLBARER RADSTURZ FÜR JEDEN ROLLSTUHL

Dank eines ausgeklügelten Systems kann der Radsturz Ihres **Trigo** direkt an Ihrem Stuhl verändert werden!

Der Radsturz kann in der gewünschten Position von 0°, 2°, 4° oder 6° (je nach Konfiguration) verändert werden.

Ihr Trigo wird mit dem bei der Bestellung gewählten Radsturz geliefert.

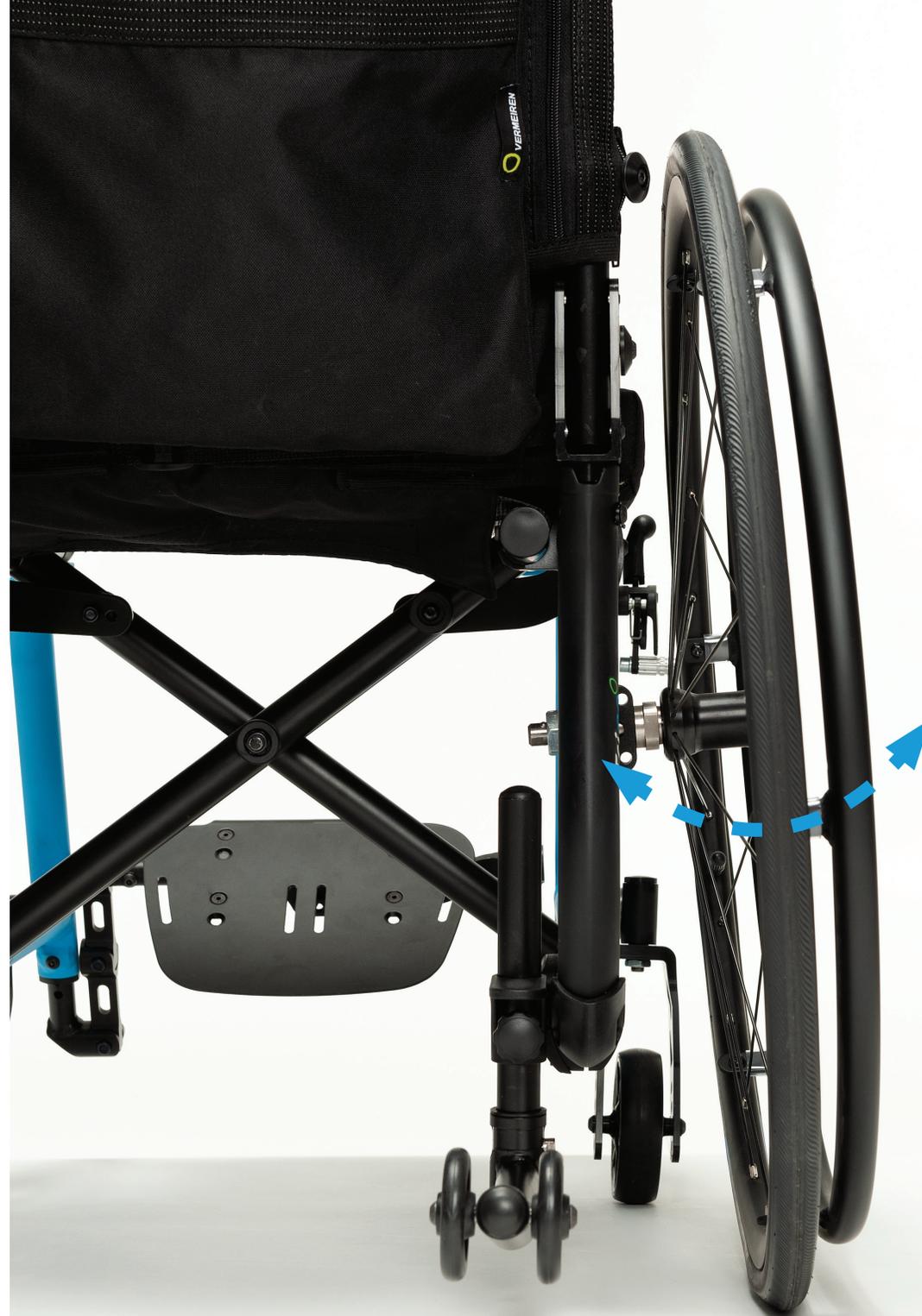



## EINSTELLUNG DER RADPOSITION

Um den **Trigo** an den Benutzer anzupassen und ihn mehr oder weniger 'aktiv' zu machen, kann die Position der Hinterräder direkt am Rahmen Ihres Rollstuhls eingestellt werden.

Die Hinterräder können nach vorne oder hinten in 8 verschiedene Positionen eingestellt werden. Ihr Trigo wird mit den Rädern in der bei der Bestellung gewünschten Position geliefert.



## NEIGUNGSVERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Es gibt 3 mögliche Rückenlehnen für den **Trigo**: eine feste Rückenlehne, eine neigbare Rückenlehne und eine neigbare und klappbare Rückenlehne. Bei der zweiten und dritten Option kann die Neigung der Rückenlehne am Stuhlrahmen leicht eingestellt werden.



## ERHÄTLICH IN KINDERGRÖSSEN

Der Rollstuhl **Trigo** wurde so konzipiert, dass er sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet ist. Aus diesem Grund ist der Trigo in Sitzbreiten von 30 cm bis 50 cm erhältlich. Auch für die kleineren Größen ist eine große Vielfalt an Zubehör und Optionen erhältlich.



# OPTIONEN

## SCHIEBGRIFFE



**PH 01** Feste Schiebegriffe (12 cm)

**PH 02** Kurze, feste Schiebegriffe (8 cm)



**PH 03** Feste, klappbare Schiebegriffe



**PH 04** Höhenverstellbare Schiebegriffe  
(innerhalb der Rückenlehnenrohre)



**PH 05** Höhenverstellbare Schiebegriffe  
(hinter den Rückenlehnenrohren)



**PH 06** Klappbare und höhenverstellbare  
Schiebegriffe (hinter den Rückenlehnenrohren)



Die Schiebegriffe **PH 03** und **PH 06** sind voll klappbar.

# OPTIONEN


## ARMLEHNEN UND KLEIDERSCHUTZ




**B82-S und B82-C**  
fester und  
verstellbarer  
seitlicher  
Kleiderschutz,  
Aluminium oder Carbon




**B82**  
fester und  
verstellbarer  
Kleiderschutz,  
Aluminium  
mit Kotflügel

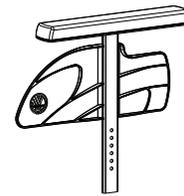

**Bi5**  
höhenverstellbare  
Armlehnen

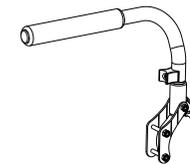


**TUBE**  
Armlehnen, nach  
hinten versenkbar  
(nur mit festem Rücken)

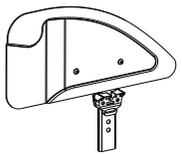


**B82SL-A**  
Langer,  
abnehmbarer  
Kleiderschutz  
aus Aluminium



**B82L-A**  
Langer, abnehmbarer  
und verstellbarer  
Kleiderschutz mit  
Kotflügel, Aluminium

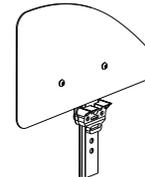

**B82S-C**  
Abnehmbare  
und verstellbare  
Kleiderschutz-  
vorrichtungen  
aus Carbon

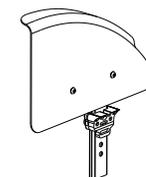

**B82-C**  
Langer, abnehmbarer  
und verstellbarer  
Kleiderschutz mit  
Kotflügel, Carbon

Erhältlich in Winkeln von 70°, 80° und 90°



Monoblock-Rohr  
aus Aluminium



Monoblock, Fußplatte  
aus Aluminium, klappbar



Monoblock, Fußplatte  
aus Carbon, klappbar



Monoblock,  
mit höherer Fußplatte



Monoblock, mit  
einklappbarer Fußplatte



Getrennte  
Fußplatten

# OPTIONEN

## FUSSSTÜTZE



70°



80°



90°



BA6-Fußstützen,  
um 5 cm gekürzt



# OPTIONEN

## RÄDER

### Vorderräder



**Standard schwarz**  
3", 4", 5", 6"



**Transparent**  
3", 4", 5", 6"



**Aluminium silber**  
3", 4", 5"



**Aluminium blau**  
3", 4", 5"



**Aluminium rot**  
3", 4", 5"



**Carbon**  
4", 5"



**LED**  
4", 5"

### Hinterräder



**Standard-Räder**  
18"



**Design-Räder**  
20", 22", 24", 26"



**Spirit Rad mit  
Alu-Radnabe**  
24"



**Spirit Rad mit roter  
Alu-Radnabe**  
24"



**Spirit Rad mit blauer  
Alu-Radnabe**  
24"



**Off-road Räder**  
24"

Messeinheit: Zoll



**Räder Right Run schwarz**  
erhältlich mit Design- und  
Spirit-Rädern



**Räder Marathon Plus**  
erhältlich mit Design- und  
Spirit-Rädern

# OPTIONEN


## BREMSEN



Druck- oder Ziehbremse



Sportbremse

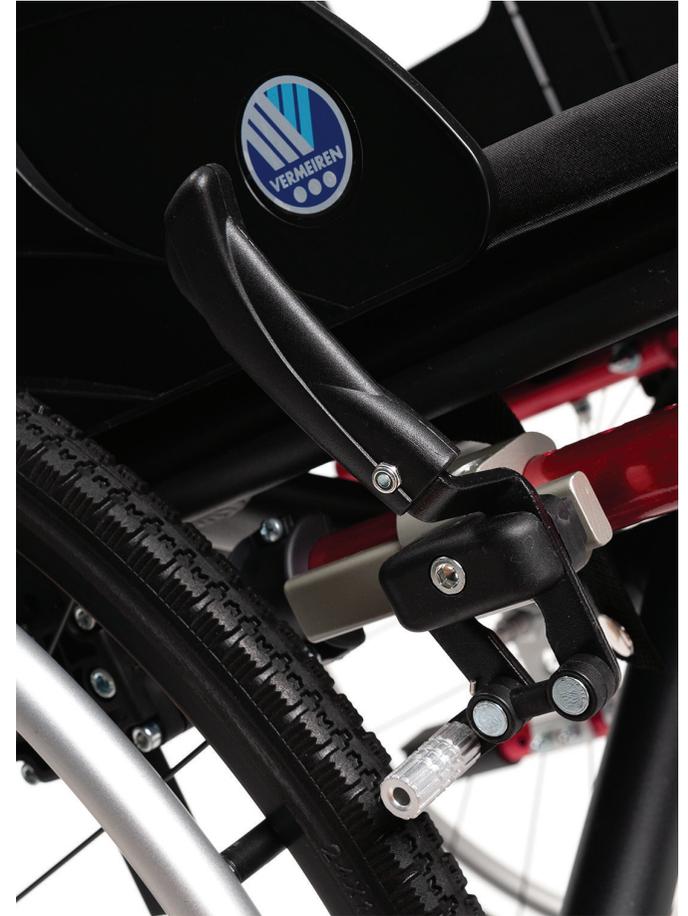

Konventionelle Bremse mit Klappgriffen (B40)

# OPTIONEN

## OPTIONEN UND ZUBEHÖR



**Krückenhalter  
links oder rechts**  
B31L oder B31R



**Kippschutz  
links oder rechts**  
B78L oder B78R



**Reiserolle**  
B86



**Stabilisierungsstange  
für Rückenlehne**  
B90



**Neoflex-Gurtsystem**  
Alle möglichen Lösungen finden  
Sie auf unserer Webseite:  
[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)



**Seitenpelotte  
links oder rechts, (gross/klein)**  
L04 L oder L04 R  
L04S L oder L04S R



**Trommelbremse**  
24» x 1/3 8» graue Räder



**Speichenschutz**  
Alle möglichen Modelle finden  
Sie auf unserer Webseite:  
[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)

**Weitere Optionen und Zubehör auf unserem Bestellbogen**

# MEHRERE FARBOPTIONEN



**C4M - leuchtend rot matt**  
**C4G - leuchtend rot glänzend**




**C5M - schwarz matt**  
**C5G - schwarz glänzend**




**C8M - gelb matt**  
**C8G - gelb glänzend**




**C29M - leuchtend silber matt**  
**C29G - leuchtend silber glänzend**

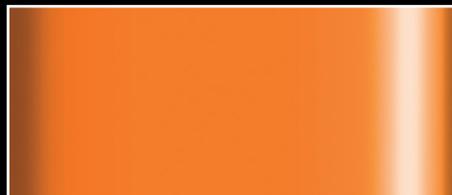


**C53M - orange matt**  
**C53G - orange glänzend**

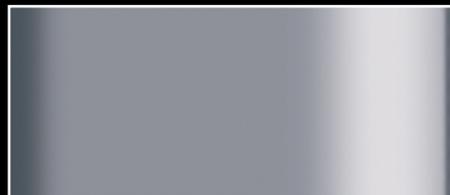

**C55M - inox matt**  
**C55G - inox glänzend**

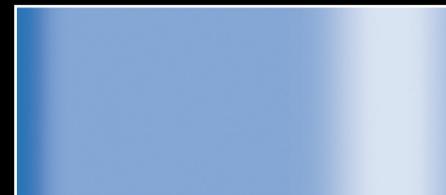


**C56M - blau metallic matt**  
**C56G - blau metallic glänzend**

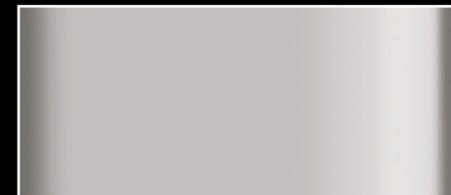

**C59M - champagner matt**  
**C59G - champagner glänzend**



**C71G - dunkelblau metallic glänzend (mit Aufpreis)**

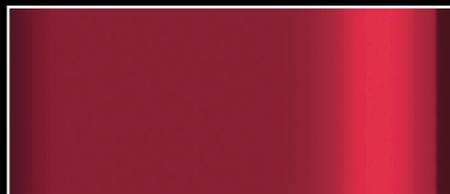

**C72G - rot metallic glänzend (mit Aufpreis)**



**C73G - grün metallic glänzend (mit Aufpreis)**



**C76M - weiss matt**  
**C76G - weiss glänzend**



**C78G - hellblau glänzend (mit Aufpreis)**



**C79M - softblau matt**  
**C79G - softblau glänzend**



**C85M - Vhellgrün matt**  
**C85G - hellgrün glänzend**




**C87M - melonengelb matt**  
**C87G - melonengelb glänzend**



**C88M - gold matt**  
**C88G - gold glänzend**



**C89M - kupfer matt**  
**C89G - kupfer glänzend**

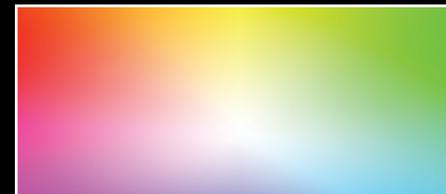

**Und viele andere Farben  
auf Ihren Wunsch  
(mit Aufpreis)**

# TECHNISCHE DATEN



Sitzbreite : **300 - 500 mm** (in Schritten von 20 mm)

Gesamtbreite (Sturz 0°) : **460 - 660 mm**

Sitztiefe : **320 - 500 mm** (in Schritten von 20 mm)

Sitzhöhe : **380 - 510 mm** (je nach Konfiguration)

Gesamtgewicht : **ab 12kg** (je nach Konfiguration)

Maximales Benutzergewicht : **70 oder 130kg** (je nach Konfiguration)

Möglichkeit einer umklappbaren Rückenlehne : **ja**

Rückenlehnenhöhe : **250 - 510 mm** (je nach Konfiguration)

Erhältliche Vorderräder in Grössen : **3", 4", 5", 6"**

Erhältliche Hinterräder in Grössen : **18", 20", 22", 24", 26"**

Radsturz : **0° - 6°** (direkt am Stuhl einstellbar)

Erhältliche Bezüge : **Nylon, Wabe, Mesh 3**

Abmessungen in mm, Gewicht in kg. Masstoleranz: 15 mm, 1,5 kg; 1,5°

# Anmerkungen

## VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)

Tel.: +41(0)33 335 14 75

Fax: +41(0)33 335 14 67

@ : info@vermeiren.ch

**www.vermeiren.ch**

---

---

---

---

---

---

---

---

Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Fachhandler in Ihrer Nähe.

Alle Rechte, auch an der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil der Gebrauchsanweisung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Ausgabe August 2024

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Für die neueste Version siehe: **www.vermeiren.ch**

TriGO<sup>o</sup>